


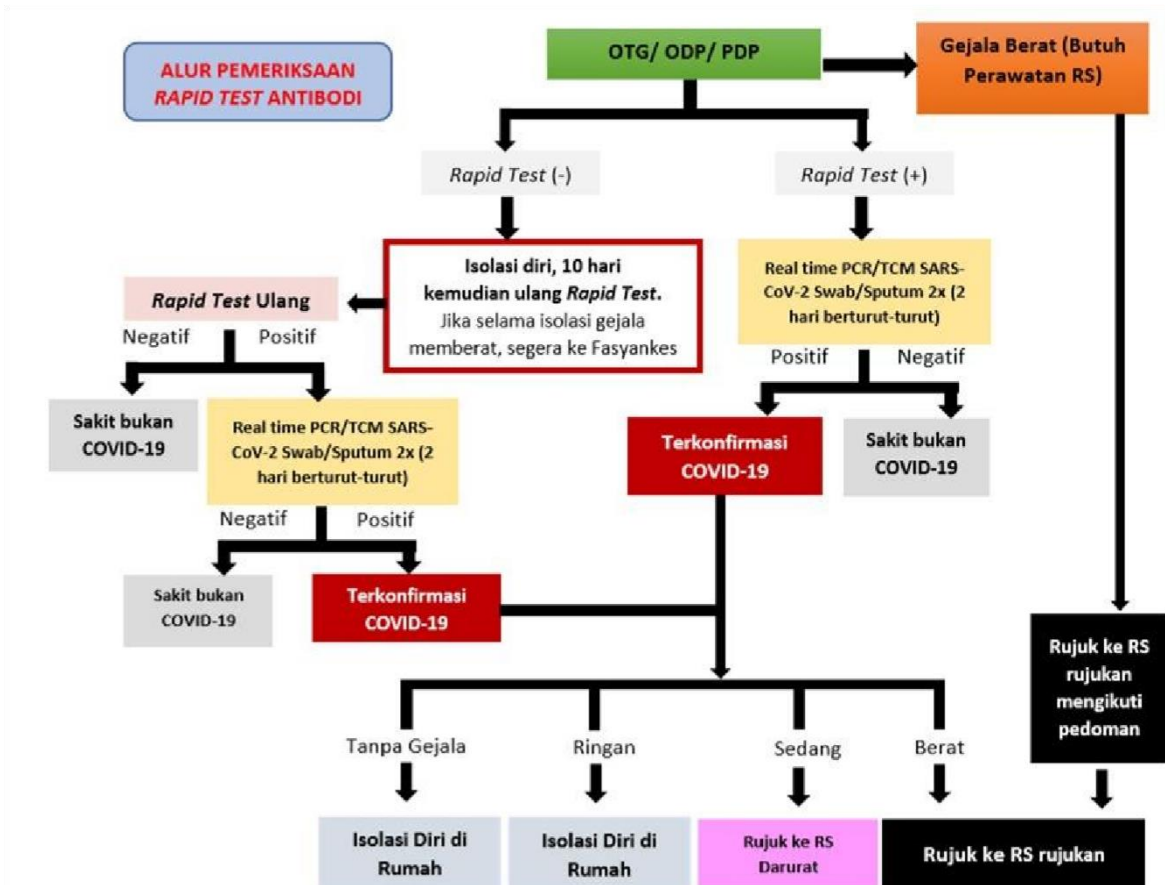
	<b>PROSEDUR PELAKSANAAN RDT UNTUK PDP DAN ODP COVID-19</b>		
	<b>SOP</b>	No. Dokumen: / /SOP-P2P/III/2020	
		No. Revisi: 00	
		Tanggal Terbit: 28 Maret 2020	
		Halaman : 1/3	
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS			SADIYANTO, SKM., M.Kes NIP. 19621011 198402 001
1. Pengertian	<p>Prosedur ini mencakup kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan Rapid Diagnostik tes (RDT) kepada Pasien Dalam Pemantauan (PDP) dan atau Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19 di Wilayah Kerja Puskesmas.</p> <p>Penanganan COVID-19 di Indonesia menggunakan <i>Rapid Test</i> Antibodi dan/atau <i>Rapid Test</i> Antigen pada OTG/kasus kontak dari pasien konfirmasi COVID-19. <i>Rapid Test</i> Antibodi/ <i>Rapid Test</i> Antigen dapat juga digunakan untuk deteksi kasus ODP dan PDP pada wilayah yang tidak mempunyai fasilitas untuk pemeriksaan RT-PCR atau tidak mempunyai media pengambilan spesimen (Swab dan VTM). Pemeriksaan <i>Rapid Test</i> Antibodi dan/atau <i>Rapid Test</i> Antigen hanya merupakan <i>screening</i> awal, hasil pemeriksaan <i>Rapid Test</i> Antibodi dan/atau <i>Rapid Test</i> Antigen harus tetap dikonfirmasi dengan menggunakan RT-PCR.</p>		
2. Tujuan	Sebagai acuan untuk Puskesmas dalam melakukan kegiatan berupa <i>screening</i> awal, hasil pemeriksaan <i>Rapid Test</i> Antibodi dan/atau <i>Rapid Test</i> Antigen harus tetap dikonfirmasi dengan		


	<b>PROSEDUR PELAKSANAAN RDT UNTUK PDP DAN ODP COVID-19</b>	
	<b>SOP</b>	No. Dokumen: / /SOP-P2PIII/2020
		No. Revisi: 00
		Tanggal Terbit: 28 Maret 2020
		Halaman : 2 / 3
	menggunakan RT-PCR.	
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Nomor .....	
4. Referensi	Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Corona Virus Disease (Covid-19)-Rev 04, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maret 2020	
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Puskesmas menentukan status PDP dan atau ODP</li> <li>2. Petugas melakukan Tatalaksana sesuai kondisi pasien</li> <li>3. Petugas menyiapkan alat dan bahan berupa RDT, lancet, alkohol swab, sarung tangan, masker, tempat sampah medis</li> <li>4. Petugas Puskesmas menyiapkan peralatan pendukung dan Alat Pelindung Diri sesuai dengan prinsip PPI</li> <li>5. Petugas melakukan komunikasi dengan PDP dan atau ODP</li> <li>6. Petugas mengoles dan melakukan penusukan dengan menggunakan lancet pada jari PDP dan atau ODP, darah di teteskan pada lubang sampel RDT sebanyak 1 tetes dan meneteskan bufer pada lubang bufer di lubang bufer RDT sebanyak 2 atau 3 tetes</li> <li>7. Petugas menunggu membaca hasil sampai 15 menit</li> <li>8. Hasil dinyatakan positif jika pada indikator RDT ada garis berwarna di C dan di T</li> <li>9. Petugas Puskesmas mencatat dan melaporkan hasil pemeriksaan sesuai format ke Dinas Kesehatan Kabupaten</li> </ol>	

	<b>PROSEDUR PELAKSANAAN RDT UNTUK PDP DAN ODP COVID-19</b>			
	<b>SOP</b>	No. Dokumen: / /SOP-P2PIII/2020		
		No. Revisi: 00		
		Tanggal Terbit: 28 Maret 2020		
		Halaman : 3 / 3		
<p>Banyumas.</p> <p>10. Melakukan komunikasi risiko baik kepada pasien, keluarga dan masyarakat</p> <p>11. Puskesmas membangun dan memperkuat jejaring kerja sama surveilans dengan pemangku kewenangan, lintas sektor dan tokoh masyarakat di wilayah Puskesmas.</p>				
6. Diagram alir	--			
7. Unit	Bidang P2P, Bidang Yankes, Puskesmas Kabupaten Banyumas			
8. Rekaman Historis Perubahan	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	-	-	-	-


	<b>PROSEDUR PELAKSANAAN RDT UNTUK PDP DAN ODP COVID-19</b>	
	<b>SOP</b>	No. Dokumen: / /SOP-P2P/III/2020
		No. Revisi: 00
		Tanggal Terbit: 28 Maret 2020
		Halaman : 4 / 3


Berikut merupakan alur pemeriksaan *Rapid Test* Antibodi dan *Rapid Test* Antigen.



	<b>PROSEDUR PELAKSANAAN RDT UNTUK PDP DAN ODP COVID-19</b>	
	<b>SOP</b>	No. Dokumen: / /SOP-P2P/III/2020
		No. Revisi: 00
		Tanggal Terbit: 28 Maret 2020
		Halaman : 5 / 3

Alur Pemeriksaan Menggunakan *Rapid Test* Antibodi

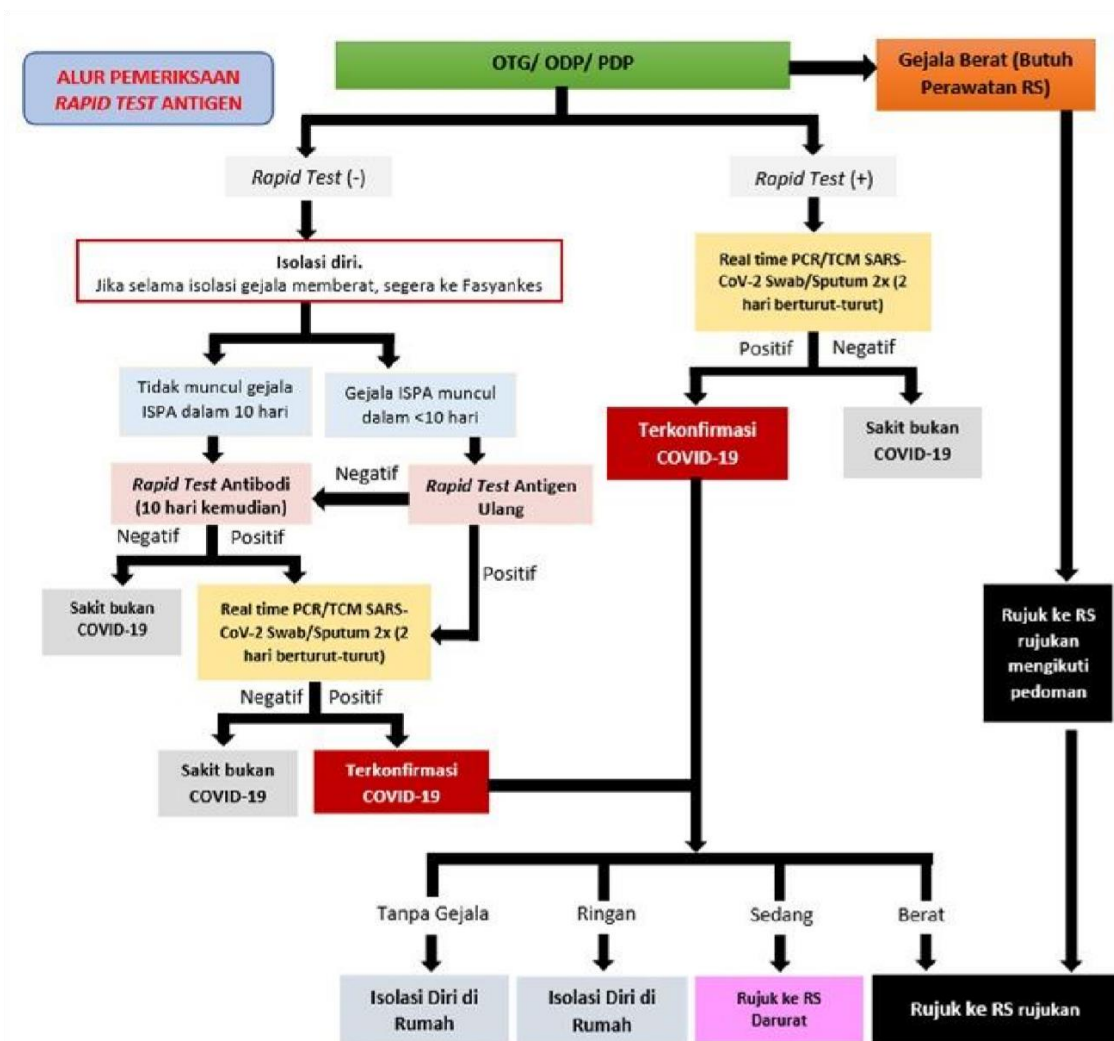

	<b>PROSEDUR PELAKSANAAN RDT UNTUK PDP DAN ODP COVID-19</b>	
	<b>SOP</b>	No. Dokumen: / /SOP-P2P/III/2020
		No. Revisi: 00
		Tanggal Terbit: 28 Maret 2020
		Halaman : 6 / 3